

DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE



KANJO

Badewannenlifter der
neuesten Generation



Jetzt auch antibakteriell
durch SilverLine-Technologie!

Entwickelt in Zusammenarbeit mit:



Fraunhofer
ICT

Hilfe in wichtigen Momenten

Oft sind es die alltäglichen Dinge, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen und auch deren Helfer herausfordern – gerade in Bereichen wie Bad und WC bieten sich deshalb verschiedene Hilfsmittel an. Menschen, die in manchen Situationen Unterstützung benötigen, brauchen nicht auf ein großes Maß an Selbstständigkeit zu verzichten, denn wir bieten gute Lösungen für größten Komfort in den entscheidenden Situationen.

Die Firma DIETZ hat sich auf die Entwicklung von Alltagshilfen spezialisiert, die für Entlastung im täglichen Leben sorgen. Dabei liegt unser Fokus nicht nur auf innovativer Technik und außerordentlichem Komfort, sondern auch auf ergonomischem Design. So werden die kleinen Herausforderungen des Alltags bei jedem Mal ein großes Stück leichter – überzeugen Sie sich.

Individualität in jedem Bereich

Die tägliche Hygiene problemlos durchführen zu können, ist ein wichtiges Stück Lebensqualität und die Voraussetzung für einen unbeschwerten Alltag. Um das auch bei eingeschränkter Bewegungsfreiheit zu erhalten, brauchen die Betroffenen Unterstützung verschiedenster Art. Ein Grund für die Firma DIETZ, immer weiter innovative Hilfsmittel zu entwickeln, die viele Situationen des täglichen Lebens erleichtern.

Wir wachsen mit unserer Erfahrung und finden so Lösungen für die unterschiedlichen Bedürfnisse. Jeder Mensch stellt bei seiner persönlichen Versorgung ganz individuelle Ansprüche – wir stellen uns dieser großen Verantwortung und entwickeln qualitativ hochwertige Produkte, die diese Erwartungen erfüllen.

Nur Qualität zählt – auch bei der Beratung

Die Produkte von DIETZ erhalten Sie exklusiv im ausgewählten Fachhandel. Nur so können wir Ihnen kompetente Beratung und eine für Ihre Ansprüche optimale Empfehlung garantieren. Dies gilt insbesondere bei technisch hochwertigen Produkten wie es die KANJO Badewannenlifter sind. Besuchen Sie Ihren nächstgelegenen Fachhändler und überzeugen Sie sich selbst!



QVH-Zertifizierung

Die DIETZ GmbH wurde für den hohen Standard ihrer Beratungs- und Servicequalität mit dem QVH-Gütesiegel ausgezeichnet.



KANJO

Badewannenlifter Standard

In fast jeder Lebensphase kann man in diese Situation kommen: Ob jemand verletzt, krank oder pflegebedürftig ist – jeder Betroffene verlangt nach Körperhygiene. Und um diese zu ermöglichen, bietet DIETZ mit den Badewannenliftern KANJO und KANJO SilverLine die perfekten Helfer, wenn es um die tägliche Hygiene geht: ergonomisch optimal gestaltet, leicht anzubringen und bequem zu bedienen. Bereits in der Standardausführung bietet dieser Lifter alle Funktionen und Zubehörteile, die das Baden in der Wanne angenehm machen.



Abb. KANJO Standard

KANJO^{SilverLine}

Sicheres Baden in Perfektion

Mit dem KANJO SilverLine bringt DIETZ **ein völlig neues Produkt** auf den Markt, das in Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie ICT entwickelt wurde.

Das Resultat: Der KANJO SilverLine zeichnet sich durch **einzigartige HighTech-Qualitäten** aus, die die Benutzer mit Sicherheit zu schätzen wissen. Besonders außergewöhnlich ist seine innovative Oberflächen- und Materialstruktur, die dank Nanotechnologie über wasserabweisende Eigenschaften verfügt – ähnlich dem Lotus-Effekt – und antibakteriell wirkende Silber-Ionen beinhaltet.



Entwickelt in Zusammenarbeit mit:



Abb. KANJO SilverLine
mit Bezügen

SilverLine-Technologie: Viele Details ergeben ein rundum optimales Produkt




Kunststoff mit
Nanotechnologie

Durch Hinzufügen von Additiven während des Herstellungsprozesses wird eine **wasserabweisende Oberfläche** geschaffen. So bleiben Schmutzpartikel im Wasser gebunden, und nicht mehr an der Produkt-oberfläche haften. Sie werden mit den Wassertropfen weggespült. Dieses Phänomen wurde zuerst auf den Blättern der Lotusblume beobachtet – und ist seitdem als **Lotus-Effekt** bekannt.

Der KANJO SilverLine bietet mit seiner innovativen Oberflächen- und Materialstruktur noch nie dagewesene Produkteigenschaften.

Made in Germany – und zwar komplett

Beim Badewannenlifter KANJO SilverLine fand nicht nur die Entwicklung am Fraunhofer-Institut für Chemische Technologie bei Karlsruhe statt, sondern von der Teilefertigung bis zum Zusammenbau läuft auch der **komplette Produktionsprozess in Deutschland** ab.

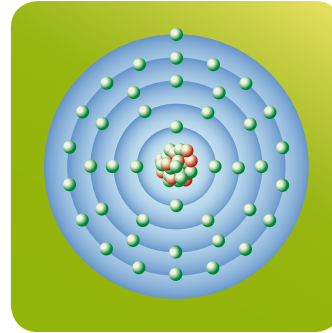

Antibakterielles
Material

Durch fortschrittliche Additiv-Technologie gelang es dem Fraunhofer Institut, Silberpartikel in das Kunststoffmaterial einzubetten. Das Silber gibt bei Kontakt mit Wasser Ionen ab, wodurch **99,9 Prozent aller herkömmlichen Keime und Erreger zuverlässig vernichtet werden**. Das patentierte Material kann so Infektionen vorbeugen und verhindert zugleich Geruchsbildung und Verfärbung.

Die ganz besonderen Pluspunkte:

- Antibakteriell durch Silber-Ionen
- Keine Verfärbungen oder schlechte Gerüche
- Leicht zu reinigen durch Lotus-Effekt
- Extrem hartes und widerstandsfähiges Material mit kratz- und abriebfesten Oberflächen
- Durch die sehr niedrige thermische Leitfähigkeit des Materials behält der Körper die Temperatur, da die Wärme nicht abgeführt wird.

NEU

Max. 140 kg



Made in Germany

KANJO

Badewannenlifter

Der KANJO schafft Sicherheit und Freiheit bei der täglichen Körperpflege. Ergonomisch geformte Sitz- und Rückenflächen und per Knopfdruck einstellbare Liegepositionen ermöglichen entspannten Badekomfort.

Standard

- Für alle üblichen Badewannen-größen
- Handsteuerung (klein) mit Spiralkabel und Akkuladegerät
- Oberfläche hautfreundlich und rutschsicher
- Rückenlehne schwenkbar bis 40°

- Stufenloses Heben und Senken auf Knopfdruck
- Extrem standfeste Bodenplatte (53 x 22 cm)
- Zerlegbar in 2 Hauptbestandteile

Akku

- Lithium-Ionen-Technik (Ladezeit 3 Stunden)

NEU

Antibakteriell



Made in Germany

Fraunhofer
ICT

KANJO SilverLine

Badewannenlifter antibakteriell

Der KANJO SilverLine schützt durch Silber-Ionen vor allen herkömmlichen Keimen und Erregern und seine innovative Oberflächenstruktur verfügt, dank Nanotechnologie, über wasserabweisende Eigenschaften – ähnlich dem Lotus-Effekt. Kurz: Perfekte Hygiene beim Baden.

Standard

- Wie KANJO

Zusätzlich

- Handsteuerung (groß) mit Saugnapf zur leichten Befestigung am Badewannenrand, Spiralkabel und Akkuladegerät

- Material antibakteriell durch Silber-Ionen
- Leichtes Reinigen der Oberfläche dank Nanotechnologie

Akku

- Lithium-Ionen-Technik mit Schnell-ladetechnologie (unter 1 Stunde)

	KANJO	KANJO SilverLine	KANJO XXL
HMV-Nr.			
Bezeichnung	Badewannenlifter	Badewannenlifter antibakteriell	Badewannenlifter XXL
Sitzbreite ohne / mit Seitenklappen (cm)	37,5 / 71	37,5 / 71	37,5 / 71
Sitztiefe (cm)	50	50	50
Sitzhöhe (cm)	6,5–45,5	6,5–45,5	6,5–45,5
Rückenlehne B x H (cm)	35 x 68	35 x 68	35 x 68
Gesamthöhe (cm)	110,5	110,5	110,5
Gesamttiefe, Rückenlehne aufrecht (cm)	69	69	69
Gesamttiefe, Rückenlehne abgesenkt (cm)	90	90	90
Max. Belastbarkeit (kg)	140	140	170
Gesamtgewicht inkl. Handsteuerung (kg)	10,8	10,9	11,5
Artikel-Nr.	750/16	750/20	
Preis (Euro)	549,00	699,00	
Artikel-Nr. mit Bezügen	750/17 blau	750/18 blau, antibakteriell	750/19 blau, antibakteriell
Preis (Euro)	639,00	829,00	895,00

Preise inkl. gesetzl. MwSt.

Zubehör

		KANJO	KANJO SilverLine	KANJO XXL	Artikel-Nr.	Preis (Euro)
	Dreh- und Übersetzhilfe, Bezug blau	■		■	750/14	92,20
	Dreh- und Übersetzhilfe, Bezug blau, antibakteriell		■		075164	101,15
	Drehhilfe, Bezug blau	■		■	750/12	83,30
	Drehhilfe, Bezug blau, antibakteriell		■		075165	89,25
	Höhenadapter 2cm (Set)	■	■		075167	32,49
	Abduktionskeil	■	■	■	075168	282,63
	Seitenklappabweiser, 2 St.	■	■	■	075166	16,07
	Handsteuerung (groß) inkl. Akku	■			075160	148,51



Hilfe in wichtigen Momenten

Oft sind es die alltäglichen Dinge, die Menschen mit Bewegungseinschränkungen und auch deren Helfer herausfordern – gerade in Bereichen wie Bad und WC bieten sich deshalb verschiedene Hilfsmittel an. Menschen, die in manchen Situationen Unterstützung benötigen, brauchen nicht auf ein großes Maß an Selbstständigkeit zu verzichten, denn wir bieten gute Lösungen für größten Komfort in den entscheidenden Situationen.

Die Firma DIETZ hat sich auf die Entwicklung von Alltagshilfen spezialisiert, die für Entlastung im täglichen Leben sorgen. Dabei liegt unser Fokus nicht nur auf innovativer Technik und außerordentlichem Komfort, sondern auch auf ergonomischem Design. So werden die kleinen Herausforderungen des Alltags bei jedem Mal ein großes Stück leichter – überzeugen Sie sich.

QVH-Zertifizierung

Die DIETZ GmbH wurde für den hohen Standard ihrer Beratungs- und Servicequalität mit dem QVH-Gütesiegel ausgezeichnet.

Ja, ich interessiere mich für die Badewannenlifter von DIETZ und möchte eine weitere Beratung zu diesen Produkten:



- ☐ KANJO
- ☐ KANJO SilverLine
- ☐ KANJO XXL

Name/Vorname									
Straße/Hausnummer									
PLZ				Ort					
Telefon				E-Mail					

ANTWORT

DIETZ GmbH Reha-Produkte
Descostaße 10
76307 Karlsbad-Ittersbach

Das Porto
übernehmen
wir für Sie.

Rollstühle

Gehhilfen

Elektrofahrzeuge & Antriebe

Bad & WC

XXL-Produkte

Beatmungshilfen

Patienten-Lifter

Mobilitäts- & Alltagshilfen

Anti-Dekubitus

DIETZ CustomLine

Ihr Fachhändler

DIETZ[®]
REHA-PRODUKTE

Descostraße 10 · D-76307 Karlsbad-Ittersbach
Telefon 07248 / 91 86-0 · Telefax 07248 / 91 86-86
www.dietz-reha.de